



SharpPoint™

The Surgeon's Edge™

CATALOGUE 2014/2015



Distribué en France par :
FCI S.A.S.
France Chirurgie Instrumentation SAS
20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS
Tél. 01.53.98.98.98 / Fax. 01.53.98.98.99
fci@fci.fr / www.fci.fr

**SURGICAL
SPECIALTIES**
CORPORATION

Couteaux

Couteaux à paracentèse

Couteaux ClearPort™	1
Couteaux standards	1

Couteaux à incision limbique relaxante

Couteaux à incision limbique relaxante.....	2
---	---

Couteaux à incision phaco

Couteau Clear Control 3D™	3
Couteaux IQ Geometry™	4
Couteaux Clear Corneal, double biseau	5
Couteaux Clear Corneala double biseau, bords parralèles tranchants.....	5
Couteaux, biseau au-dessus	6
Couteaux double biseau.....	6
Couteaux biseau au-dessus, côtés tranchants	7
Couteaux simple biseau	7

Couteaux à incision phaco / implant

Couteaux trapézoïdal ClearTrap™ Clear Corneal/Implant,biseau.....	8
Couteaux Pilot Tip™, biseau au-dessus.....	9
Couteaux, biseau au-dessus.....	9

Couteaux Crescent

Couteaux Sharptome™ Crescent.....	10
Couteaux Mini-Crescent	10

Couteaux de vitrectomie

Couteaux de vitrectomie.....	11
------------------------------	----

Couteaux spéciaux

Couteaux spéciaux, double biseau	12
Couteaux spéciaux	12
Manches	13

Couteaux de sécurité


Couteau de sécurité SharpGuard™	14
---------------------------------------	----

Couteaux à paracentèse

Couteaux **ClearPort™**


Architecture & Géométrie de coupe ClearPort™

Les couteaux Sharpoint™ ClearPort™ ont été spécialement conçus pour réaliser des micro-incisions auto-étanches adaptées à la taille de la canule.

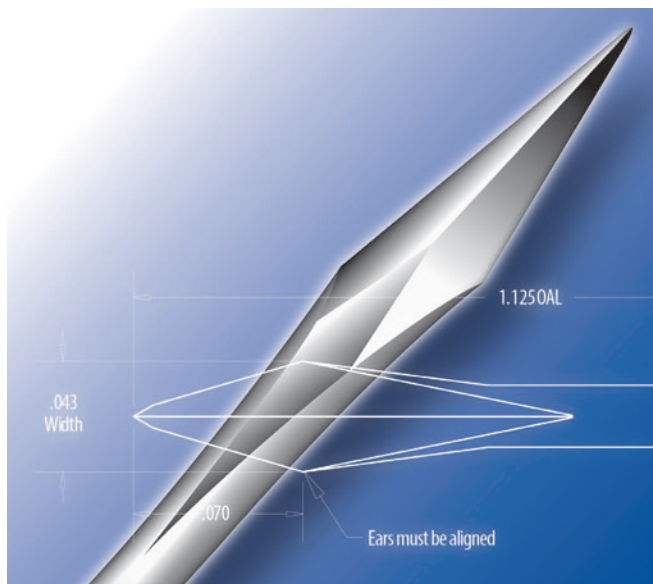

Couteaux à paracentèse **ClearPort™**

Conditionnement : Boite de 6

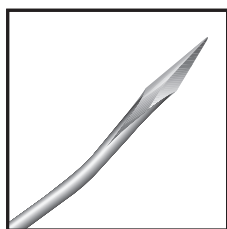

Couteau	Description	Taille de l'instrument
78-2510	0.6mm Angulé	25g
78-2310	0.8mm Angulé	23g
78-2010	1.1mm Angulé	20g
78-2010G	1.1mm Angulé*	20g
78-2019	1.4mm Angulé, repères à .0mm & 1.2mm	19g


*Couteau de sécurité SharpGuard™

Couteaux standards

Conditionnement : Boite de 6



pointe à usage unique interchangeable

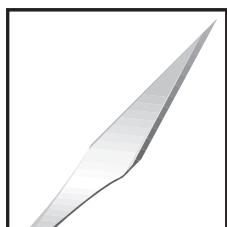


Couteau	Pointe	Description
72-1501	72-1502	15° Droit
72-1501G	•	15° Droit*
72-1591	•	15° Angulé
72-2201	72-2202	22.5° Droit
72-3001	72-3002	30° Droit
72-4501	72-4502	45° Droit


*Couteau de sécurité SharpGuard™



pointe à usage unique interchangeable

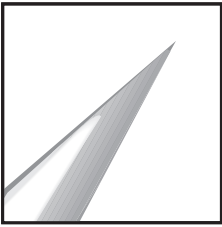

Couteau	Pointe	Description
72-1531	72-1532	15° 3.0mm (Profondeur de lame en butée)
72-1551	72-1552	15° 5.0mm (Profondeur de lame en butée)
72-3036	•	30° 3.5mm (Profondeur de lame en butée)

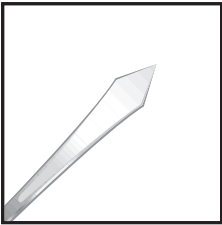


Couteau	Description
72-1001	1.0mm Paracentèse, droit, simple biseau

Couteaux à incision limbique relaxante


Couteaux à incision limbique relaxante

Conditionnement : Boite de 6

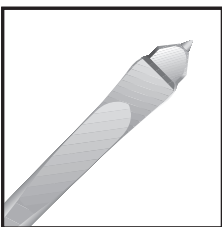

Couteau	Description
72-0303	300 µm Droit
72-3503	350 µm Droit
72-0503	500 µm Droit
72-5503	550 µm Droit
72-6003	600 µm Droit

Conditionnement : Boite de 6

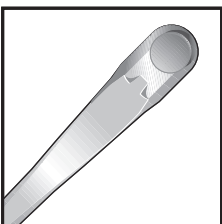

Couteau	Description
72-0301	300 µm Droit
72-0401	450 µm Droit


Clear Control 3D™

Sharpness is one thing, **control is everything**




Force de pénétration et épaisseur de la lame

Clear Control 3D™ vs. couteau Sharpoint™ standard¹

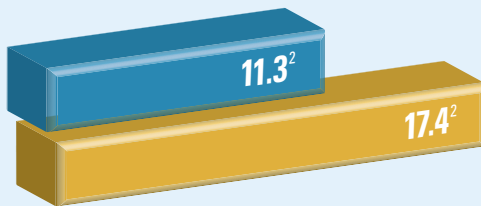

Diminution de 35% de la force de pénétration

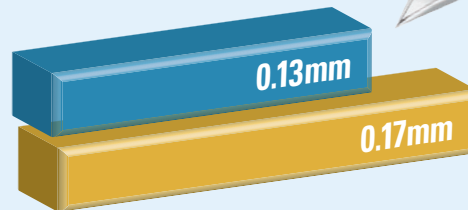

Diminution de l'épaisseur de la lame de 22%


■ Clear Control 3D™

■ Couteau standard

¹ Étude comparative de Surgical Specialties Corporations. Valeurs moyennes reportées. ² Mesuré en grammes (un seul passage)

Couteaux Clear Control 3D™

Conditionnement : Boite de 6

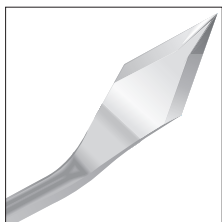

Couteau	Description
72-1050	1.0mm Angulé
72-1550	1.5mm Angulé
72-1650	1.6mm Angulé
72-1850	1.8mm Angulé
72-2050	2.0mm Angulé
72-2250	2.2mm Angulé
72-2450	2.4mm Angulé
72-2550	2.5mm Angulé
72-2650	2.65mm Angulé
72-2750	2.75mm Angulé
72-2850	2.85mm Angulé
72-3050	3.0mm Angulé
72-325	3.2mm Angulé

Couteaux IQ Geometry™


innovative design performs beyond standard knives:

Forme du biseau

Minimise la surface en contact avec les tissus permettant ainsi de réduire la force de pénétration

Sharp™ Infinite Edge™


Procédé technologique de fabrication des lames Sharp™

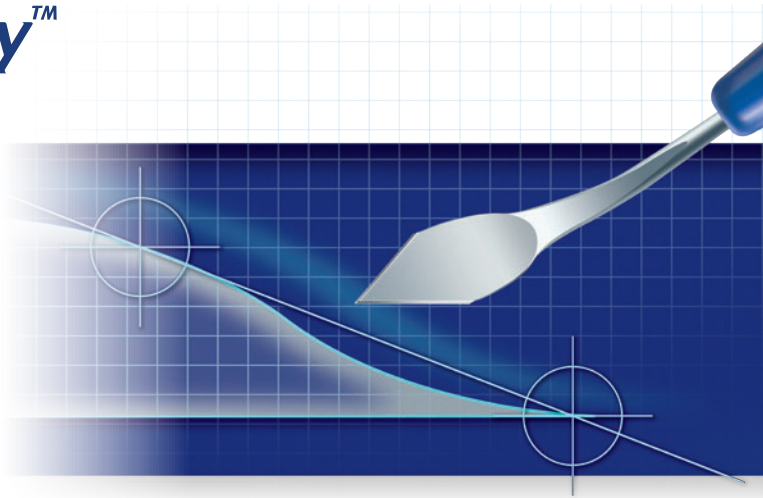

Couteaux IQ Geometry™, biseau au-dessus

Réduit la surface de pénétration de la lame en 2 points de contact. Le design fin de la lame permet de diminuer la force de pénétration .

Conditionnement : Boite de 6

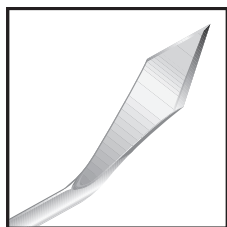

Couteau	Description
72-1540	1.5mm Angulé, biseau au-dessus
72-2040	2.0mm Angulé, biseau au-dessus
72-2240	2.25mm Angulé, biseau au-dessus
72-2540	2.5mm Angulé, biseau au-dessus
72-2640	2.65mm Angulé, biseau au-dessus
72-2740	2.75mm Angulé, biseau au-dessus
72-2840	2.85mm Angulé, biseau au-dessus
72-3040	3.0mm Angulé, biseau au-dessus
72-3240	3.2mm Angulé, biseau au-dessus

Couteaux IQ Geometry™ ClearTrap™, biseau au-dessus

Réduit la surface de pénétration de la lame en 2 points de contact. Le design fin de la lame permet de diminuer la force de pénétration, le design trapézoïdal breveté avec les lignes de repères permet une double utilisation (phaco et implantation).

Conditionnement : Boite de 6



Couteau	Description
77-1725	1.7 - 2.2 - 2.5mm Angulé, avec repères

Couteaux pour incision phaco

Architecture

Les biseaux ont été conçus pour inciser et recourber les tissus afin d'obtenir une incision droite et étanche.

Profil de la lame


Le design fin de la lame permet de minimiser les effets sur l'astigmatisme en compensant la courbure de la cornée.

Marquage unique breveté

Les repères visuels à 1.5mm, 1.75mm et 2.0mm permettent de contrôler la profondeur de l'incision pendant l'intervention.


Clear Corneal - Vue dessus

Clear Corneal - Vue dessous

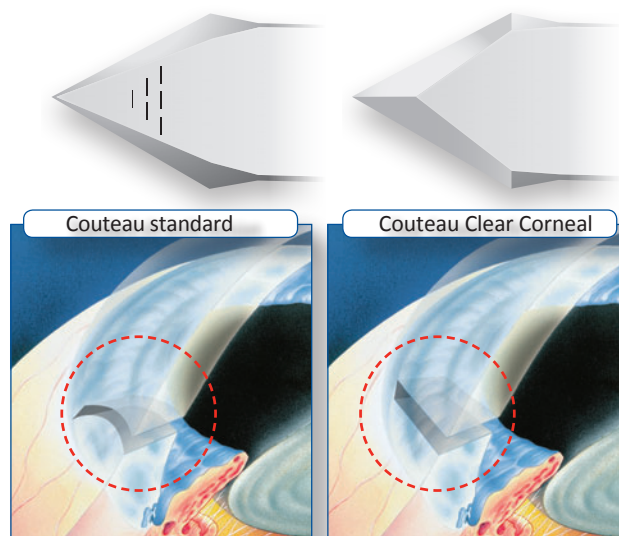

Couteaux Clear Corneal, double biseau

Conditionnement : Boite de 6

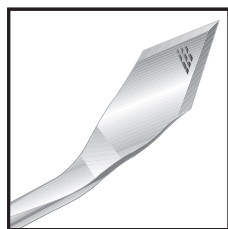

Couteau	Description
72-1361	1.3mm Angulé, double biseau, avec repère à 1.0mm (largeur)
72-1661	1.6mm Angulé, double biseau, avec repère à 1.4mm (largeur)
72-1863	1.8mm Angulé, double biseau, avec repère à 1.5mm (largeur)
72-2263	2.2mm Angulé, double biseau, avec repères à 1.5mm et 1.75mm (largeur)
72-2463	2.4mm Angulé, double biseau, avec repères (largeur)
72-2663	2.65mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-2763	2.75mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-2763G	2.75mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur), sécurisé
72-2863	2.85mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-2863G	2.85mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur), sécurisé
72-3061	3.0mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-3263	3.2mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-4963	4.9mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)

Couteaux Clear Corneal, double biseau, bords parallèles tranchants

Ces couteaux Sharpoint™ Clear Corneal, double biseau, disposent d'une lame avec 2 bords parallèles tranchants.

Conditionnement : Boite de 6




Couteau	Description
72-2635	2.65mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-2735	2.75mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-2835	2.85mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-3035	3.0mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)
72-3235	3.2mm Angulé, double biseau, avec repères (profondeur)

Couteaux, biseau au-dessus

Conditionnement : Boite de 6




pointe à usage unique interchangeable

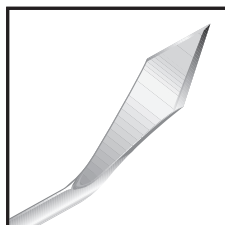

Couteau	Pointe	Description
72-1461	•	1.4mm Angulé, biseau au-dessus
72-1861	•	1.8mm Angulé, biseau au-dessus
72-2261	•	2.2mm Angulé, biseau au-dessus
72-2461	•	2.4mm Angulé, biseau au-dessus
72-2561	72-2562	2.5mm Angulé, biseau au-dessus
72-2561G	•	2.5mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-2661	72-2662	2.65mm Angulé, biseau au-dessus
72-2661G	•	2.65mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-2761	72-2762	2.75mm Angulé, biseau au-dessus
72-2761G	•	2.75mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-2861	72-2862	2.85mm Angulé, biseau au-dessus
72-2861G	•	2.85mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-2961	72-2962	3.0mm Angulé, biseau au-dessus
72-2961G	•	3.0mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-3261	72-3262	3.2mm Angulé, biseau au-dessus
72-3261G	•	3.2mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
72-3561	•	3.5mm Angulé, biseau au-dessus
72-4561	•	4.5mm Angulé, biseau au-dessus
72-5163	•	5.1mm Angulé, biseau au-dessus

Couteaux, double biseau

Conditionnement : Boite de 6

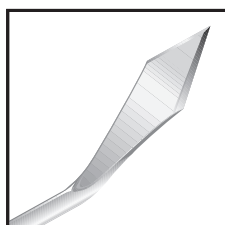

Couteau	Description
72-1831	1.8mm Angulé, double biseau
72-2231	2.2mm Angulé, double biseau
72-2231G	2.2mm Angulé, double biseau, sécurisé
72-2431	2.4mm Angulé, double biseau
72-2431G	2.4mm Angulé, double biseau, sécurisé
72-2531	2.5mm Angulé, double biseau
72-2631	2.65mm Angulé, double biseau
72-2831	2.8mm Angulé, double biseau
72-2931	3.0mm Angulé, double biseau
72-3231	3.2mm Angulé, double biseau
72-3270	3.2mm Angulé à 70°, double biseau
72-3531	3.5mm Angulé, double biseau

Couteaux, biseau au-dessus, côtés parallèles

Conditionnement : Boite de 6



pointe à usage unique interchangeable



Couteau

72-2912

72-3212

Pointe

72-2913

•


Description

3.0mm Angulé, biseau au-dessus

3.2mm Angulé, biseau au-dessus

Couteaux, simple biseau

Conditionnement : Boite de 6

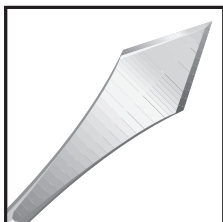

Couteau

72-2801

72-2901

72-3201

Description

2.85mm Droit

3.0mm Droit

3.2mm Droit

Couteau pour incision phaco / implant


Design trapézoïdal

Précision

Permet aux chirurgiens d'élargir l'incision phaco avec précision pour l'insertion de l'implant intra-oculaire

Indicateurs

Le marquage de la lame breveté : les lignes de repères assure un contrôle visuel de la largeur de l'incision phaco et de l'incision pour la mise en place de l'implant.

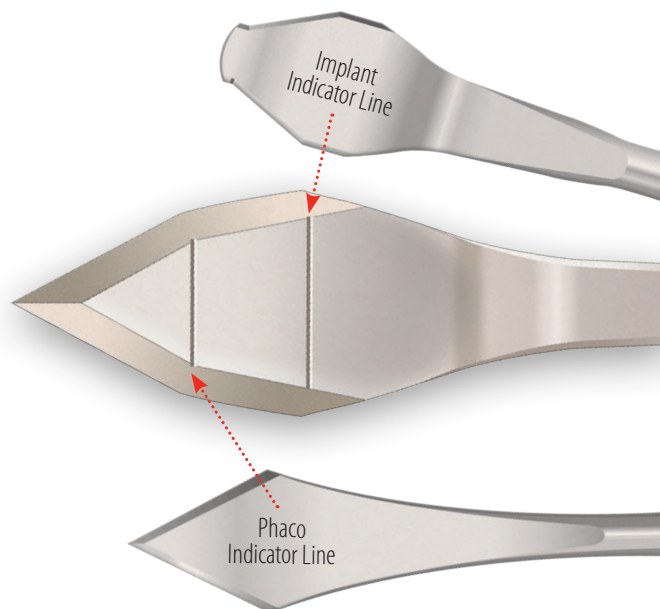

Couteaux ClearTrap™ trapézoïdal Clear corneal / Implant

La lame trapézoïdale est dotée d'indicateurs : 2 lignes de repère permettent de contrôler la largeur de l'incision.

Conditionnement : Boite de 6




Couteau	Description
75-1214	1.2 - 1.4mm Angulé, avec repères
75-1517	1.5 - 1.7mm Angulé, avec repères
75-1520	1.5 - 2.0mm Angulé, avec repères
75-1618	1.6 - 1.8mm Angulé, avec repères
75-1720	1.7 - 2.0mm Angulé, avec repères
75-1822	1.8 - 2.2mm Angulé, avec repères
75-2022	2.0 - 2.2mm Angulé, avec repères
75-2522	2.5 - 2.9mm Angulé, avec repères
75-2524	2.5 - 3.2mm Angulé, avec repères
75-2723	2.75 - 3.0mm Angulé, avec repères
75-2724	2.75 - 3.2mm Angulé, avec repères
75-2725	2.75 - 3.5mm Angulé, avec repères
75-2726	2.75 - 3.75mm Angulé, avec repères
75-2824	2.85 - 3.2mm Angulé, avec repères
75-2825	2.85 - 3.5mm Angulé, avec repères
75-2826	2.85 - 3.75mm Angulé, avec repères
75-2925	3.0 - 3.5mm Angulé, avec repères
75-3225	3.2 - 3.5mm Angulé, avec repères

Couteaux pour implant

Couteaux Pilot Tip™, biseau au-dessus

Ces couteaux `SharpPoint™ Pilot Tip™ sont conçus spécifiquement pour élargir l'incision et créer une ouverture destinée à l'insertion de l'implant intra-oculaire.

Conditionnement : Boite de 6

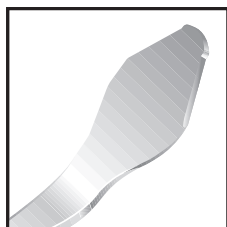

Couteau	Description
76-5361	3.2mm Angulé, biseau au-dessus
76-3461	3.5mm Angulé, biseau au-dessus
76-3761	3.75mm Angulé, biseau au-dessus
76-5161	5.2mm Angulé, biseau au-dessus
76-5561	5.5mm Angulé, biseau au-dessus

Couteaux standards pour implant, biseau au-dessus

Conditionnement : Boite de 6




Couteau	Description
76-4061	4.0mm Angulé, biseau au-dessus
76-5261	5.2mm Angulé, biseau au-dessus

Couteaux Crescent


Couteaux Crescent Sharptome™

Les couteaux Crescent Sharpoint™ Sharptome™ ont été conçus pour réaliser des volets scléreaux et des tunnels cornéens.

Conditionnement : Boite de 6

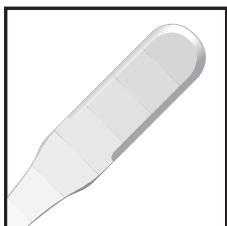

Couteau	Pointe	Description
74-1000	74-5000	2.0mm Droit

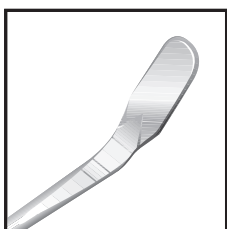

Couteau	Pointe	Description
74-1010	74-5062	2.0mm Angulé, biseau au dessus
74-1010G	•	2.0mm Angulé, biseau au dessus, sécurisé
74-1020	•	2.0mm Angulé, biseau en-dessous
74-1031	•	2.0mm Angulé, double biseau

Couteaux mini-Crescent

Conditionnement : Boite de 6



Couteau	Description
74-6910	1.25mm Angulé, double biseau


Couteaux de vitrectomie

Couteaux de vitrectomie

Conditionnement : Boite de 6



Couteau	Description
71-1901	19 gauge Droit
71-2001	20 gauge Droit
71-2301	23 gauge Droit
71-2501	25 gauge Droit

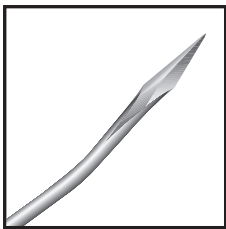


Couteau	Description
71-2061	20 gauge Angulé

Couteaux Spéciaux

Couteaux spéciaux, double biseau


Ces couteaux spéciaux ,Sharpoint™ double biseau, se caractérisent par un design unique de la lame avec un bord tranchant circulaire de 320°. Conditionnement : Boite de 6

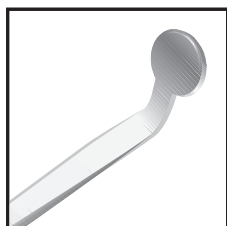


Couteau	Description
74-2261	2.2mm Angulé, double biseau
74-3061	3.0mm Angulé, double biseau

Couteaux spéciaux


Conditionnement : Boite de 6

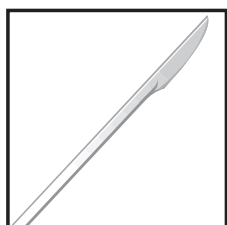

Couteau	Description
78-6810	Lame aiguille, droit, bord tranchant de 4.0mm

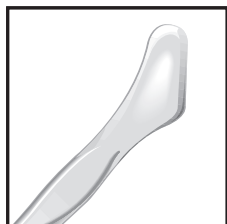

Couteau	Pointe	Description
•	78-5700	Lame sclérale, droit

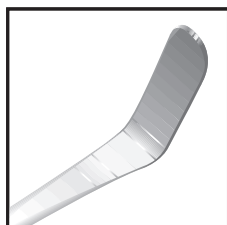


Couteau	Pointe	Description
•	78-6600	2.3mm Lame lamellaire, angulé, biseau au-dessus

Couteaux Spéciaux

Couteaux spéciaux

Conditionnement : Boite de 6

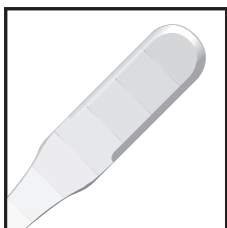

Couteau

•

Pointe

78-6900

Description

Micro-blame, droit, double biseau, contour tranchant

Manche

Le manche en aluminium Sharpoint™ est compatible avec les pointes interchangeables à usage unique mentionnées dans ce catalogue. Vendu individuellement



Manche

92-9003

Description

16cm de longueur

Couteaux de sécurité


SHARP Guard™
GUARDED KNIVES

**The Protection You Want.
The Precision You Need.**

- Manche rétractable de protection pour minimiser les risques de blessures
- Manche grippé ergonomique
- Qualité des lames SharpPoint™

Une grande variété de couteaux SharpGuard™ sont proposés par SharpPoint™. Cette gamme de couteaux de sécurité inclue entre autres les couteaux à paracentèse, les couteaux Clear Corneal, les couteaux Crescent...

Conditionnement : Boite de 5

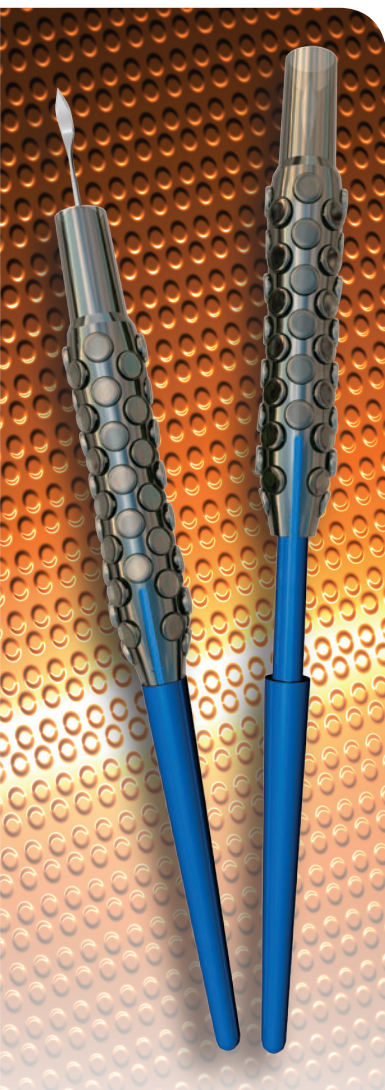

Couteau
72-1501G

Description
15° Droit, sécurisé




72-2763G
72-2863G

2.75mm Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé
2.85mm Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé



72-2231G
72-2431G
72-2561G
72-2661G
72-2761G
72-2861G
72-2961G
72-3261G

2.2mm Angulé, double biseau, sécurisé
2.4mm Angulé, double biseau, sécurisé
2.5mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
2.65mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
2.75mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
2.85mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
3.0mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé
3.2mm Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

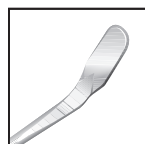

74-1010G

2.0mm Crescent, angulé, biseau au-dessus, sécurisé



78-2010G


1.1mm ClearPort™, angulé, sécurisé

**Ouverture
/
Fermeture**



OUVERT

Glisser le manche en arrière jusqu'au clic pour exposer la lame du couteau.

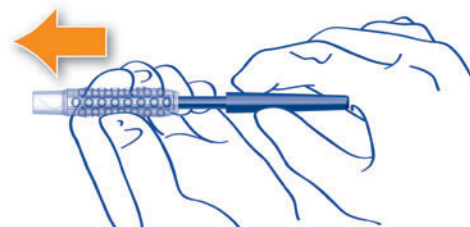

FERME

Glisser le manche en avant jusqu'au clic pour protéger la lame du couteau.

Tous les couteaux Sharpoint™ présentés dans ce catalogue, sont des dispositifs médicaux de classe IIa.

Ces dispositifs sont distribués par FCI S.A.S. et sont fabriqués par Surgical Specialties Corporation (Organisme notifié : SGS United Kingdom Ltd. CE N°0120).

Surgical Specialties Corporation, 100 Dennis Drive, Reading, PA 19606, USA
610.404.3520 • 877.991.1110 (USA and Canada only) • Fax: 610.404.4010 • Sharpoint.com OPG-PM-255R6 10/13
SHARPOINT™, THE SURGEON'S EDGE™, CLEARPORT™, CLEARTRAP™, DERMAGLIDE™, EYE GARTER™, EASY SHIELD™, INFINITE EDGE™, IQ GEOMETRY™, M.E.T.™, PILOT TIP™, POLYSYN™, POLYSYN FA™, POLYVIOLENE™, SHARPGUARD™, SHARPTOME™, ENDOGLIDE™, ULTRAGLIDE™, ULTRAFIT™, ULTRAPLUG™ and V-CANN™ are trademarks of Surgical Specialties Corporation.
ENDOGLIDE™ is a trademark of Coronet Medical Technologies Ltd.
ETHICON™, VICRYL™, PERMAHAND SILK™, ETHILON™, MERSILENE™ and PROLENE™ are trademarks of Johnson and Johnson Company.
SYNETURE™, POLYSORB™, DEXON™, SOFSILK™, MONOSOF™, DERMALON™, SURGIDAC™, SURGIPRO™ and SURGILENE™ are trademarks of Covidien.
©2001-2013 Surgical Specialties Corporation. All Rights Reserved.

Réf : FCI.SHA.15/005 ind A - janvier 2015

