





ANNEAUX DE TENSION CAPSULAIRE PRÉCHARGÉS

Désinsertions zonulaires inférieures à 120°

Indications : Les anneaux de tension capsulaire permettent de stabiliser le sac capsulaire dans les cas de forte myopie, zonulolyse, pseudo-exfoliation capsulaire (PEC), faiblesse primaire de la zonule, zonule défectueuse ou manquante, syndrome de Marchesani.

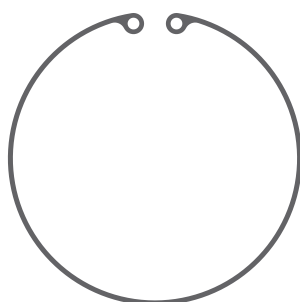

Type 14

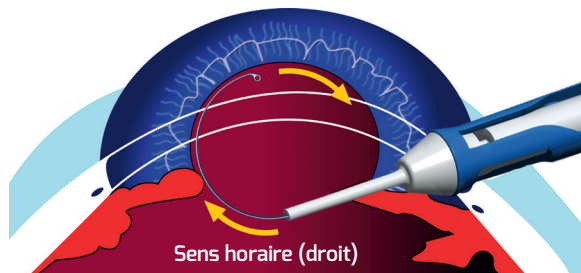


- Anneaux de tension capsulaire **prêts à la pose**
- PMMA transparent **moulé par compression**
- Orientation de l'implantation possible dans les 2 sens : **Horaire (droit) / anti-horaire (gauche)**
- Usage unique
- Boîte de 1, stérile

Référence	Diamètre ouvert / fermé	Implantation
14 JET DROIT 14 JET GAUCHE	12,3 mm / 10,0 mm	Sens horaire (DROIT) anti-horaire (GAUCHE)
14C JET DROIT 14C JET GAUCHE	13,0 mm / 11,0 mm	Sens horaire (DROIT) anti-horaire (GAUCHE)
14A JET DROIT 14A JET GAUCHE	14,5 mm / 12,0 mm	Sens horaire (DROIT) anti-horaire (GAUCHE)

MODE D'UTILISATION

1 Retirer l'injecteur de son emballage

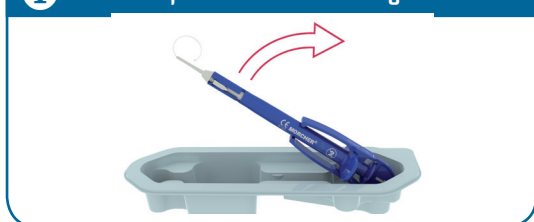

2 Tirer la pince de sécurité jusqu'à la butée



3 Retirer la pince de sécurité




4 Injecter l'anneau de tension capsulaire





ANNEAUX DE CIONNI

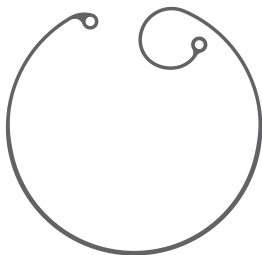



En complément des indications des anneaux capsulaires : Faiblesse secondaire de la zonule
(Désinsertions zonulaires supérieures à 120°)





Anneau de Cionni préchargé
Type 10L

- Matériau : PMMA Transparent, **moulé par compression**
- 1 ou 2 anses de fixation pour suturer l'anneau à la sclère
- Existe en modèle préchargé
- Usage unique
- Boîte de 1, stérile

Désinsertions zonulaires supérieures à 120°

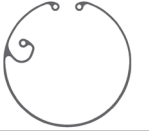Référence	Diamètre ouvert / fermé	ACCC	Implantation	Fixation sclérale
 1G	12,2 mm / 10,0 mm	6 mm	Ne peut être implanté avec un injecteur	1 anse de suture
 1L	13,0 mm / 11,0 mm	7 mm	Ne peut être implanté avec un injecteur	1 anse de suture
 2C	13,0 mm / 11,0 mm	7 mm	Possibilité d'implantation avec un injecteur	1 anse de suture
 10L JET DROIT	13,0 mm / 11,0 mm	7 mm	Préchargé : sens horaire (DROIT) Incision : 2,2 mm	1 anse de suture

Désinsertions zonulaires supérieures à 180°

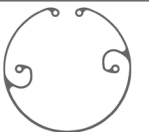Référence	Diamètre ouvert / fermé	ACCC	Implantation	Fixation sclérale
 2L	13,0 mm / 11,0 mm	7 mm	Ne peut être implanté avec un injecteur	2 anses de suture
 25	13,0 mm / 11,0 mm	5 mm	Ne peut être implanté avec un injecteur	2 anses de suture

Les anneaux de tension capsulaires préchargés et les anneaux de Cionni sont des dispositifs médicaux fabriqués par Morcher (Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH CE n°0123) et distribués par FCI S.A.S.

Pour tout renseignement : **01 53 98 98 98 - fci@fci.fr** ou rendez-vous sur **www.fci.fr**